


灵活布局

F型 / I型 / L型 / U型, 满足多种实验室应用场景

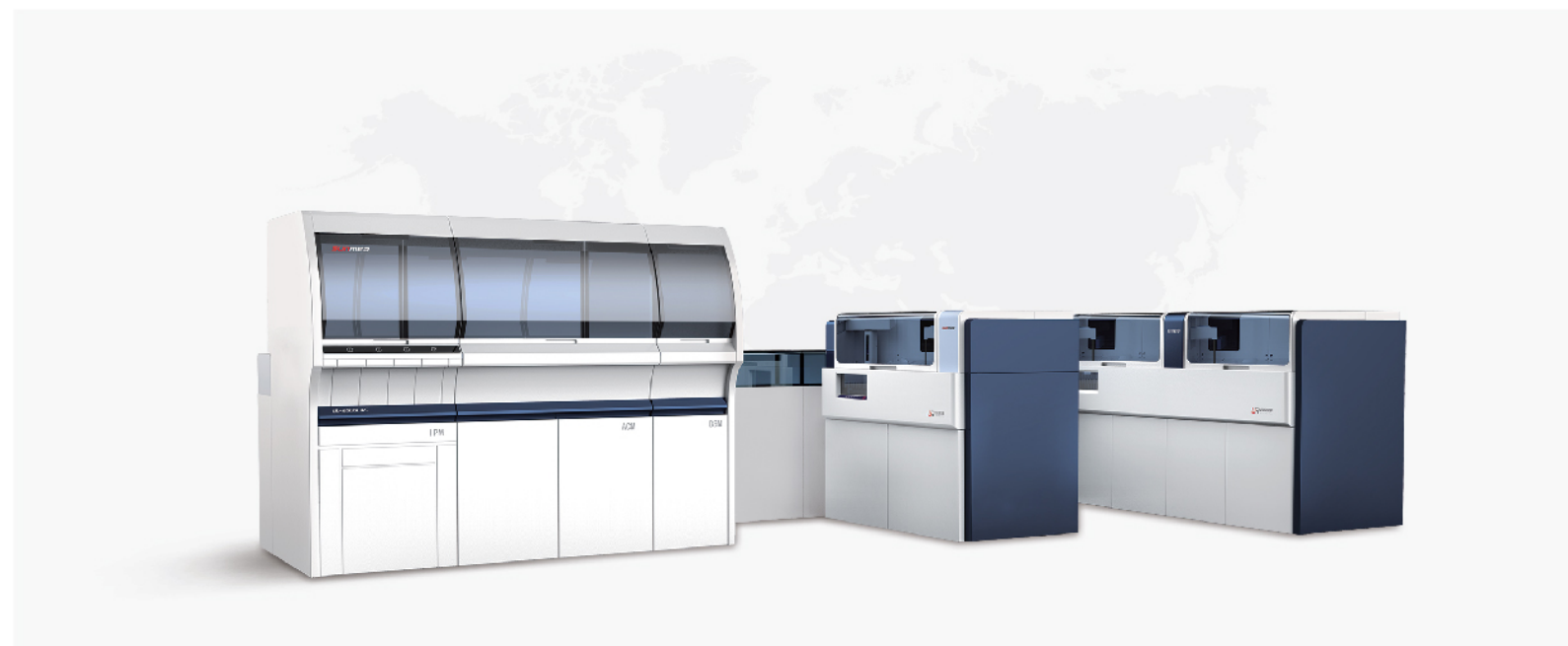

UL-2000LAS 凝血自动化流水线

上海太阳生物技术有限公司

2024.01.08 V3

地址: 中国·上海市金都路3419号 201108
电话: +86-21-54425188 服务热线: 8008206582
E-mail: shtysw@sunbiote.com <https://www.sunbiote.com>




微信公众号



电子版

UL-2000LAS 凝血自动化流水线

精巧、高效、灵活

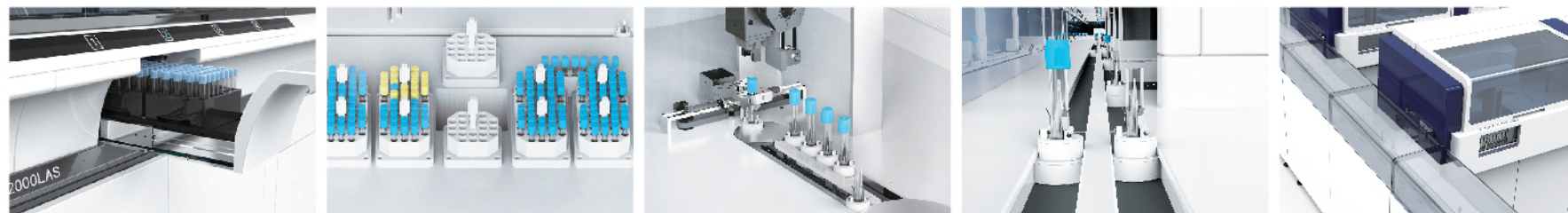

A 进样出样模块

- ◆ AI 摄像头智能识别样本管放置状态
- ◆ 自定义样本区，可设置常规样本、急诊样本、异常样本等区域
- ◆ 进样速度 800 管 / 小时
- ◆ 可放置 400 个样本

B 离心模块

- ◆ 自动装载、自动配平、自动卸载
- ◆ 自定义离心参数
- ◆ 配备低温离心机
- ◆ 离心速度 400 管 / 小时
- ◆ 单次离心 80 管

C 开盖模块


- ◆ 旋转开盖，智能识别
- ◆ 防止气溶胶污染
- ◆ 内置盖帽收集盒，满载感应
- ◆ 开盖速度 800 管 / 小时

D 轨道模块

- ◆ 双层双轨设计，提高样本周转效率
- ◆ 内置 RFID 芯片，实现样本追溯
- ◆ 样本自动旋转扫码
- ◆ 分段结构，灵活布局

E 分析模块

- ◆ 连接全自动凝血分析仪
- ◆ 支持在轨吸样
- ◆ 具备盖帽穿刺功能
- ◆ 溶血、脂血、黄疸样本智能检测
- ◆ 内置样本位可直接插入急诊样本

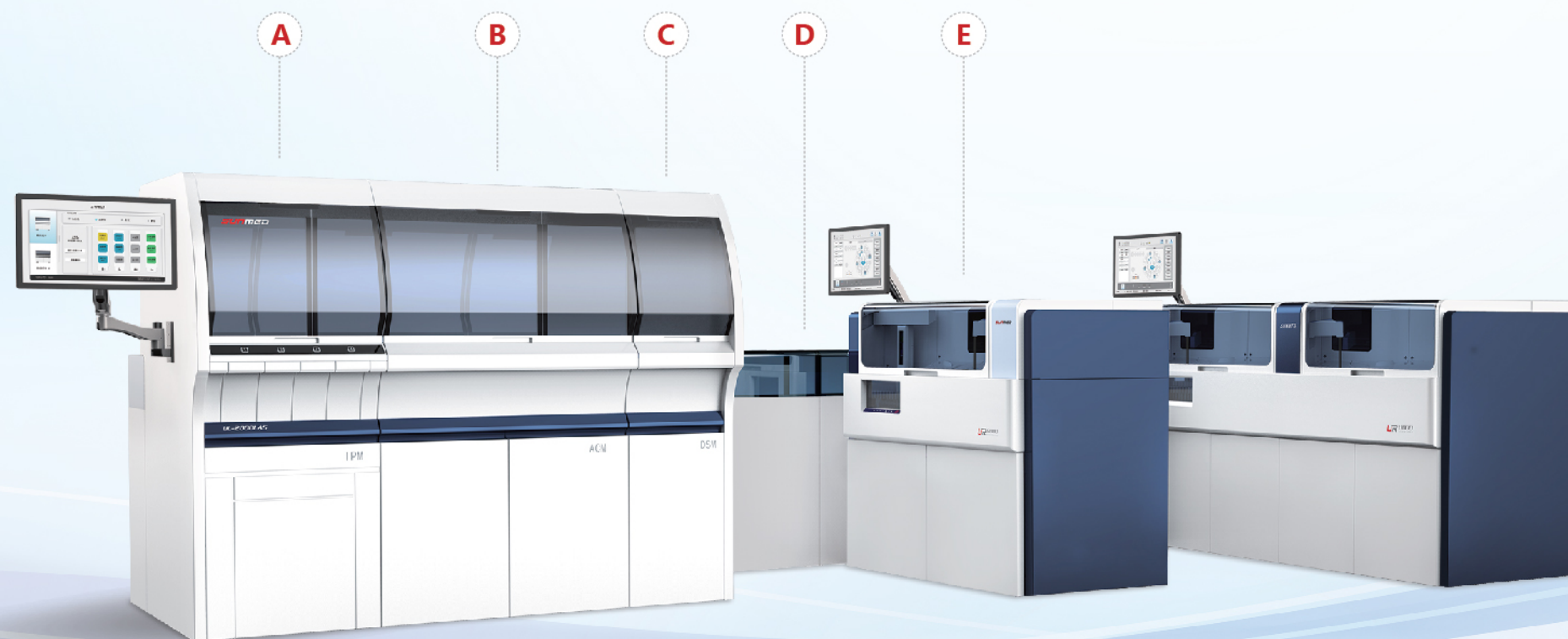

精巧设计

- ◆ 完整的前处理功能（进样、出样、离心、开盖），占地面积 < 2m²

智能软件

- ◆ 根据测试项目与分析模块处理能力，智能分配样本
- ◆ 结果自动审核
- ◆ 远程智能控制
- ◆ 语音播报，异常提示